


Uterininjektor for hysterosalpingografi

Rigidinjector

løsning. Rigidinjector består av en stiv introdusør med en glidelås, samt en stiv, røntgentett kateter med to lumen. Den har en 2,5 ml oval termoplastisk gummiballong på den distale siden, som sikrer stabil plassering. En kran regulerer ballongens inflasjon, og en slangeklemme forhindrer tilbakeløp. Rigidinjector er dessuten utstyrt med en female luer lock-kobling for injeksjon av kontrastmiddel og en 2,5 ml sprøyte for smidig påføring.

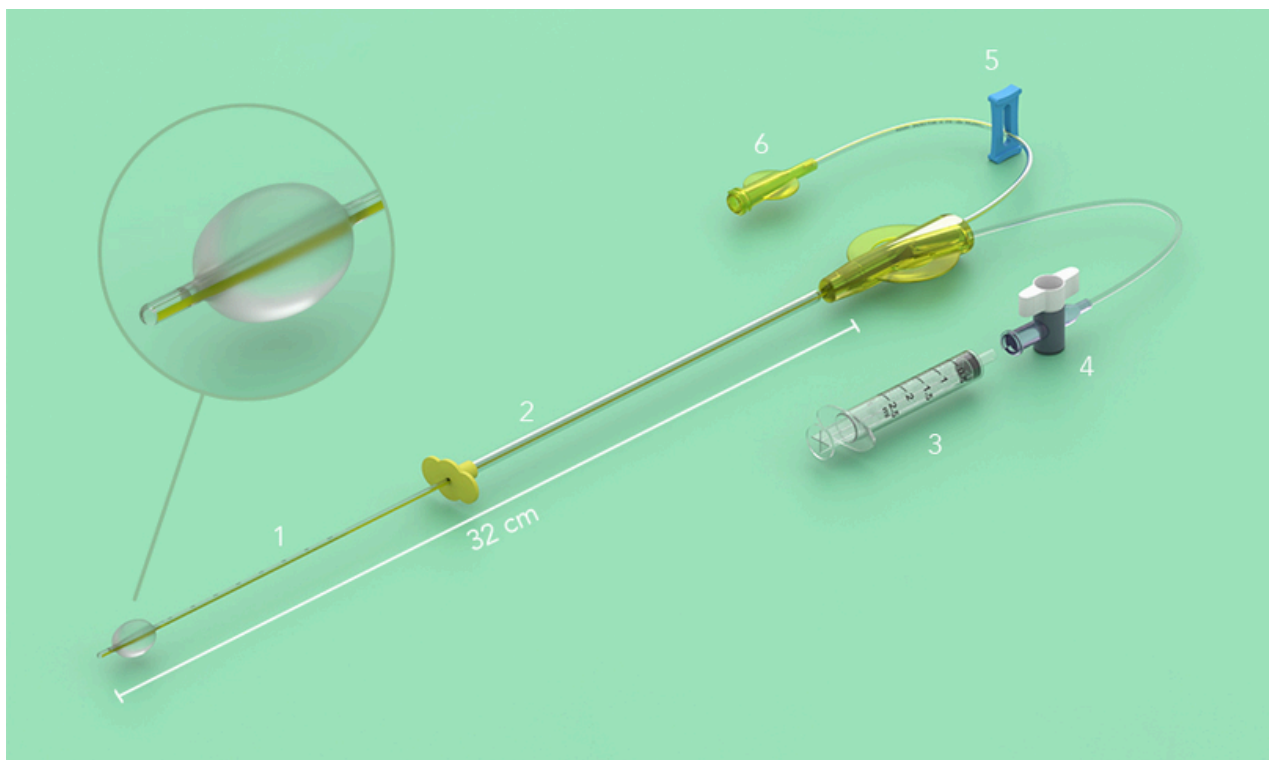

Art.nr	Navn	Ytre Ø	Steril / ikke steril	Antall/pk.
720239	Rigidinjector	1.67 mm (5 Fr)	Steril	10 stk
720225	Rigidinjector	2 mm (6 Fr)	Steril	10 stk
720251	Rigidinjector	2.33 mm (7 Fr)	Steril	10 stk