


Uterininjektor for hysterosalpingografi

Softinjector

For injeksjon av kontrastmiddel (radiopak/metylenblått) under hysterosalpingografi, har vi en praktisk løsning. Softinjector består av en stiv innføringsanordning med skyvelås, samt et mykt, røntgentett kateter med to lumen. Kateteret er utstyrt med en 2,5 ml oval termoplastisk gummiballong som sikrer stabil posisjonering. For å regulere oppblåsningen av ballongen er det en kran, og en slangeklemme forhindrer tilbakeløp. Den har også en female luer lock-kobling for injeksjon av kontrastmiddelet samt en 2,5 ml sprøyte for enkel håndtering.

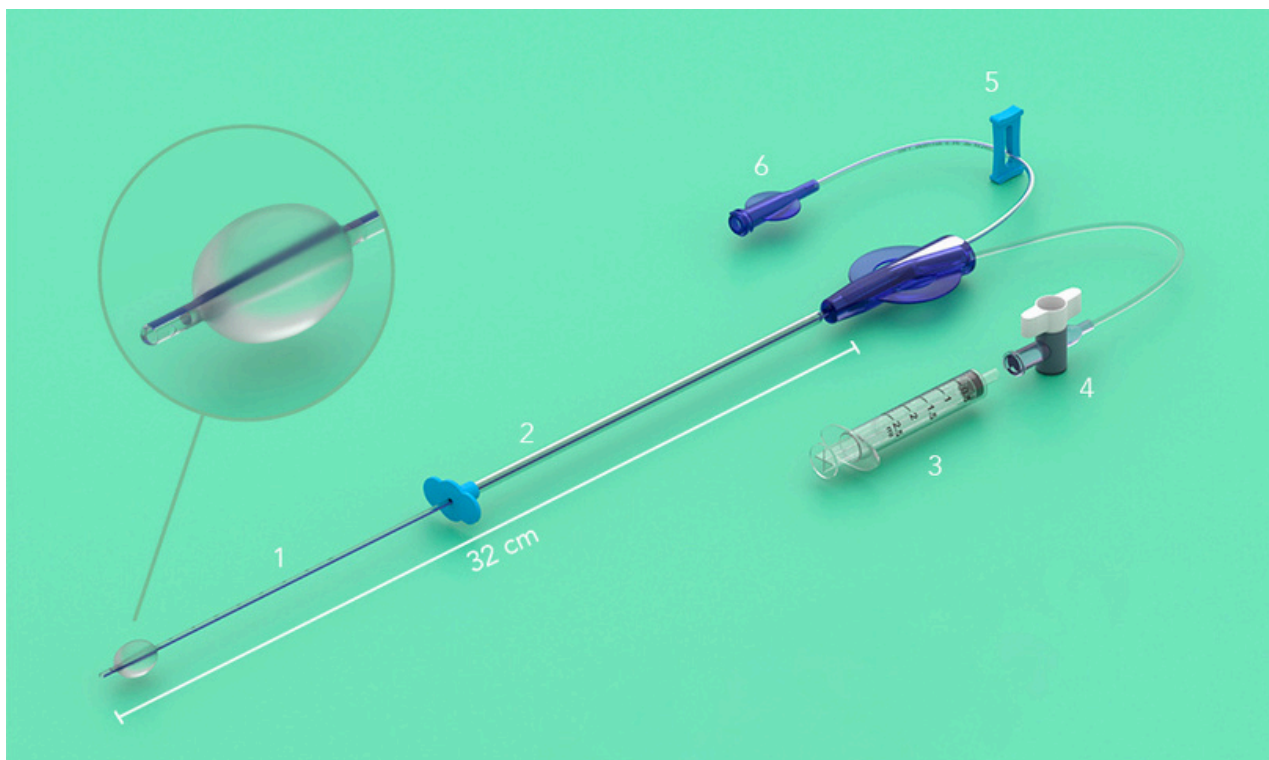

Art.nr	Navn	Ytre Ø	Steril / ikke steril	Antall/pk.
720240	Softinjector	1.67 mm (5 Fr)	Steril	10 stk
720226	Softinjector	2 mm (6 Fr)	Steril	10 stk
720250	Softinjector	2.33 mm (7 Fr)	Steril	10 stk